

# CURAPROX

HYDROSONIC  
EASY

Használati  
utasítás



 SWISS PREMIUM ORAL CARE

## **FONTOS!**

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatához.

## **FIGYELMEZTETÉS!**

Ha a közelmúltban fogászati műtéten esett át, a Hydrosonic Easy készüléket. Ha erőteljes vérzést tapasztal az eszköz használata során, akkor kérjük, azonnal forduljon a fogorvosához. Gyermekek, vagy hasonló eszköz használatában tapasztalatlan, vagy mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha előtte megismerik a készülék biztonságos használatának módját és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek ne mossanak fogat és ne kezeljék a készüléket felügyelet nélkül. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem játszanak a készülékkel. A Hydrosonic Easy megfelel az elektromágneses eszközökre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ha implantátummal vagy pacemakerrel rendelkezik, és kérdése van a készülékről, akkor a használatról kérdezze orvosát vagy az Ön implantátumának, vagy pacemakerének gyártóját.

## **BIZTONSÁGI TANÁCSOK**

Figyelem: A készülék akkumulátora kizárólag a mellékelt töltővel tölthető. A készülékben található akkumulátor nem cserélhető. Üzembehelyezés előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értéknek. Ne használja a töltőt, vagy a hálózati kábelt, ha sérült. Ne próbálja megjavítani. A hálózati kábel nem cserélhető. Ha a kábel megsérült, a teljes készüléket cserélni kell. A javításokat csak a hivatalos forgalmazó vagy a vevőszolgálati osztály végezheti el (lásd az utolsó oldalon). A töltőt tartsa távol víztől, ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

A töltő tisztítása: Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót, és csak akkor dugja be újra a konnektorba, ha a töltő rész már teljesen száraz. A készüléket soha ne hagyja a töltőn felügyelet nélkül.

## **Környezetbarát megsemmisítés**

A készüléket életciklusa végén ne a háztartási szemétbe dobja. Adja le egy újrahasznosító központban vagy hivatalos gyűjtőponton. Ezzel segít megővni a környezetet. A beépített akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a környezetre, ezért kérjük, hogy az akkumulátort egy használt akkumulátor telepen vagy egy hivatalos újrahasznosító ponton adja le.



### **A termék helyes megsemmisítése**

Az EU területén ez a jelzés azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az elhasznált készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Ezeket át kell adni újrahasznosításra, annak érdekében hogy

megakadályozzuk a nem megfelelő hulladékkezelésből származó, a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatásokat. Ezért kérjük, hogy az elhasznált eszközt a megfelelő hulladéktárolóba helyezze el, vagy vigye/küldje vissza abba az üzletbe, ahol azt vásárolta. Ők gondoskodnak majd a termék környezetbarát megsemmisítéséről.

### **USB csatlakozó technikai adatai**

Feszültség bemenet: 100-240V, 50/60 Hz, 0,15A max.

Feszültség kimenet: 5 VDC, 600 mA

### **USB kábeles töltő alap műszaki adatai**

Bemeneti feszültség: 5 VDC, 600 mA

Egyrészes alap, gumilábak**BIZTONSÁGI TANÁCSOK**

### **Markolat műszaki adatai**

- Akkumulátor: Lithium-ion (3.7 V, 700mAh).
- Az akkumulátor optimális töltési ideje: 10 óra
- A teljesen feltöltött készülék kb. 60 percig üzemképes. Ez 15 napos működésnek felel meg, ha naponta 4 percig mosogat vele
- Tisztító mozdulat: 44.000, 64.000, 84.000
- Állkapocs kvadráns időzítő: 30 másodperc
- Fogmosási időzítő: két perc
- Automatikus kikapcsolás: négy perc múlva
- Tartozékok: 1 db Hydrosonic Easy  
1 db sensitive kefefej  
1 db töltő USB kábel  
1 db USB-csatlakozó  
1 db utazó tok

### **Megfelelőség**




# GYORS BEINDÍTÁS

## 1. Helyezze fel a kefefejét

Vigyázat: ne hajlítsa meg.

## 2. Kapcsolja be a készüléket

Nyomja meg röviden a gombot.

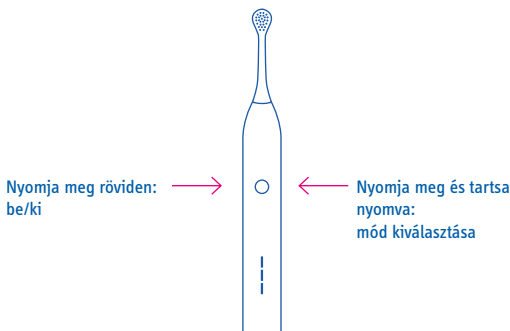

## 3. Válasszon fokozatot

A gomb hosszú nyomvatartásával választhat a fokozatokból: start, clean, smile. A kívánt fokozatnál engedje el a gombot.



## 4. Fogmosás

A tisztításkor haladjon fogról fogra, lazán, könnyedén és hagyja, hogy a sörték tegyék a dolgukat. Tartsa a fogkefét mozdulatlanul, amennyire csak lehet, enyhén rányomva a fogra, de még jobb, ha nyomás nélkül.

## 5. Két perces időzítő 30 másodperces intervallumokkal

- 30 másodperc után három rövid megszakítás jelzi, hogy továbbléphet a fogív következő részéhez.
- Egy hosszú megszakítás jelzi, hogy letelt a két perc. Négy perc használat után a készülék automatikusan kikapcsol.

## 6. Kikapcsolás

Nyomja meg röviden a gombot, az utoljára használt fokozatban fog a fogkefe legközelebb újraindulni.

# VEVŐSZOLGÁLAT

## KELLÉKSZAVATOSSÁG FELTÉTELEI

A Curaden AG a megvásárlás dátumától számított 2 év szavatosságot vállal anyag-, működési és gyártási hibákra. A kellékszavatosság teljesítése történhet javítással vagy a készülék cseréjével.

A szavatosság igény érvényesítéséhez a vásárlást igazoló eredeti számla szükséges, ezért kérjük, őrizze meg a számlát. A garancia érvényét veszti, ha a készüléket módosítják vagy az eredeti állapotát illetéktelen személy megváltoztatja.

## SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Curaden AG nem vállal szavatossági felelősséget: a készülék vagy annak egyes részeinél kialakuló, a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra; vagy ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, nem megfelelően gondozták, vagy ha a használati utasításban leírt biztonsági előírásokat nem tartották be. A készülék javítását kizárólag a CURADEN AG által kijelölt szervizpartner végezheti.

## SZERVIZ

A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez küldje el a készüléket és az eredeti számlát az adott ország hivatalos CURAPROX képviselőjéhez. Magyarországon a Curaprox termékek hivatalos forgalmazója a Sager Dental Kft.  
[www.sagerdental.hu](http://www.sagerdental.hu), e-mail cím: [info@sagerdental.hu](mailto:info@sagerdental.hu)

- A fogápolással vagy a fogszabályozó gondozásával kapcsolatos kérdésekkel konzultáljon fogorvosával. Velünk is felveheti a kapcsolatot, különösen, ha technikai problémái vannak, vagy ha valami nem működik.

A [www.sagerdental.hu/szonikus-fogkefe/gyik](http://www.sagerdental.hu/szonikus-fogkefe/gyik) aloldalon további hasznos segítséget talál a készülék kapcsán.

Amennyiben a Hydrosonic Easy nem nyerte el tetszését, a vásárlás dátumát követő 30 napon belül visszaküldheti és megtérítjük a készülék árát.

Gyártó: Curaden International AG, Kriens Svájc  
[www.curaprox.com](http://www.curaprox.com), [info@curaden.ch](mailto:info@curaden.ch)  
Magyarországi forgalmazó: Sager Dental Kft.  
Tel.: 06 1 324-2440  
[www.sagerdental.hu](http://www.sagerdental.hu), [info@sagerdental.hu](mailto:info@sagerdental.hu)

